


Работа с большей эффективностью

Компактный пользовательский интерфейс DP-50 состоит из зоны управления, буферной зоны и зоны изображения. Это помогает врачу сконцентрироваться на проведении диагностики и в любое время использовать весь потенциал системы.



1. Зона управления

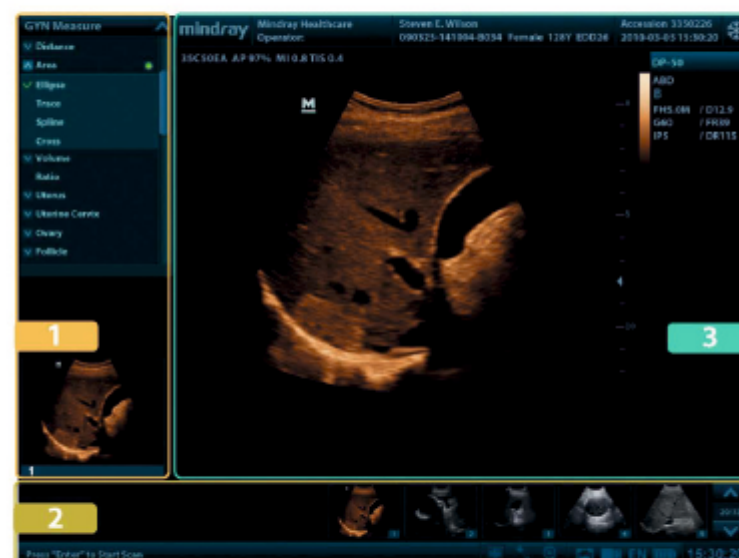


Упрощенная зона управления, - независимо от выполняемой операции, будь то комментарии, измерения, настройка изображения или параметров, - просто выберите и получите результат.

2. Буферная зона



Программируемый буфер обмена - кинопетли или изображения можно с легкостью просматривать, проигрывать, экспортировать или удалять.

3. Зона изображения

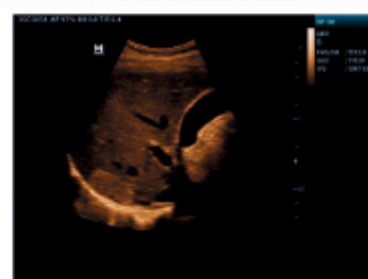

Большая область изображения предоставляет больше информации для определения точного диагноза.

Быстрое сохранение

Одним нажатием изображение сохраняется в памяти аппарата, или на USB

Шаблоны отчетов

Стандартные шаблоны для различных приложений

DICOM 3.0

Структурированные отчеты

Рабочий список

Печать DICOM

Хранение



DP-50

Ультразвуковая диагностическая система

Доступное здравоохранение



mindray
healthcare within reach

Исключительно эргономичный дизайн

DP-50 был разработан после тщательного изучения меняющихся потребностей клинической практики. Благодаря удобной новой форме, высокой мобильности и более комфортной эксплуатации эта система отлично подходит для работы в клинических условиях.



Уверенность в диагностике с новейшими технологиями

DP-50 был разработан после тщательного изучения меняющихся потребностей клинической практики. Благодаря удобной новой форме, высокой мобильности и более комфортной эксплуатации эта система отлично подходит для работы в клинических условиях.

ITouch™: Автоматическая оптимизация


Оптимизация изображения одним нажатием быстро оптимизирует однородность и динамический диапазон, очень удобно и эффективно

iClear™: Уменьшение зернистости и повышения качества изображения

iZoom™: масштабирование изображения для точного детектирования структур различных размеров

Фазоинверсная гармоника

Повышение контрастности и улучшение качества изображения путем разделения и наложения изображений, полученных с использованием основной и гармонической частоты.

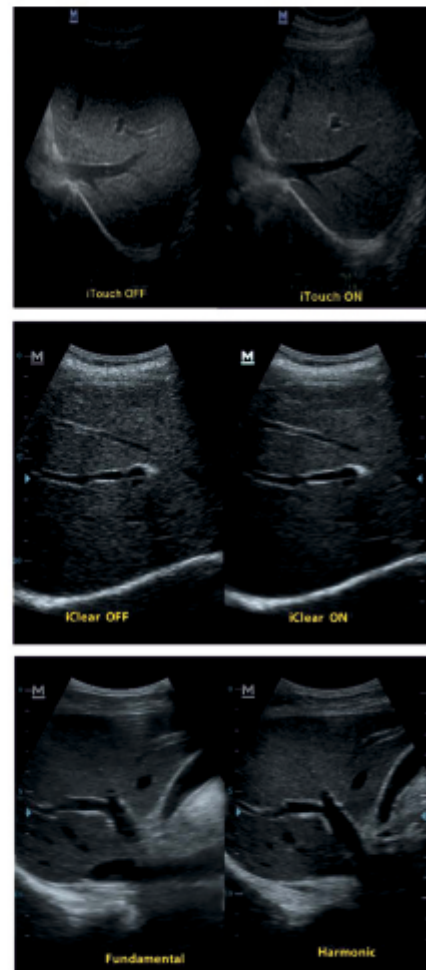

DP-50

Цифровая диагностическая ультразвуковая система

Являясь первой ступенью в мир ультразвука, черно-белые системы сегодня должны обладать отличными характеристиками для удовлетворения потребностей клиента. Поставщик медицинского оборудования мирового класса «Миндрей» хорошо понимает эти потребности, благодаря чему система DP-50 позволяет Вам проводить рутинную диагностику за меньшее время, и при этом уложиться в бюджет.



Киста печени




Гемангиома печени




Гидронефроз




Полип желчного пузыря

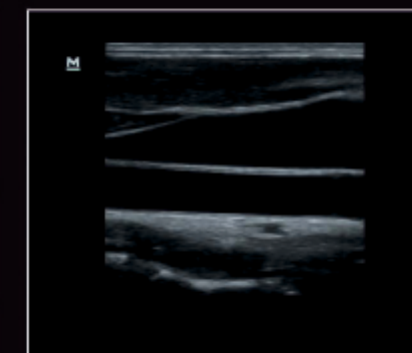

Общая сонная артерия
и яремная вена

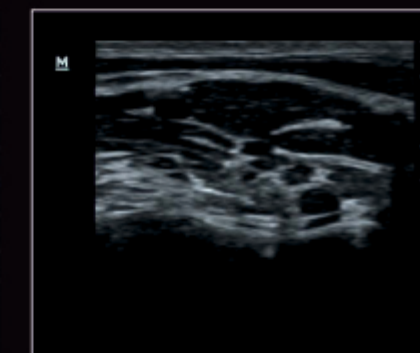

Плечевое сплетение

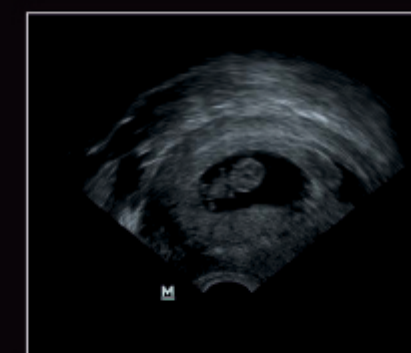

Зародыш на ранних сроках



Пальцы кисти плода



Профиль лица плода