




HyBase 3000
Операционный стол

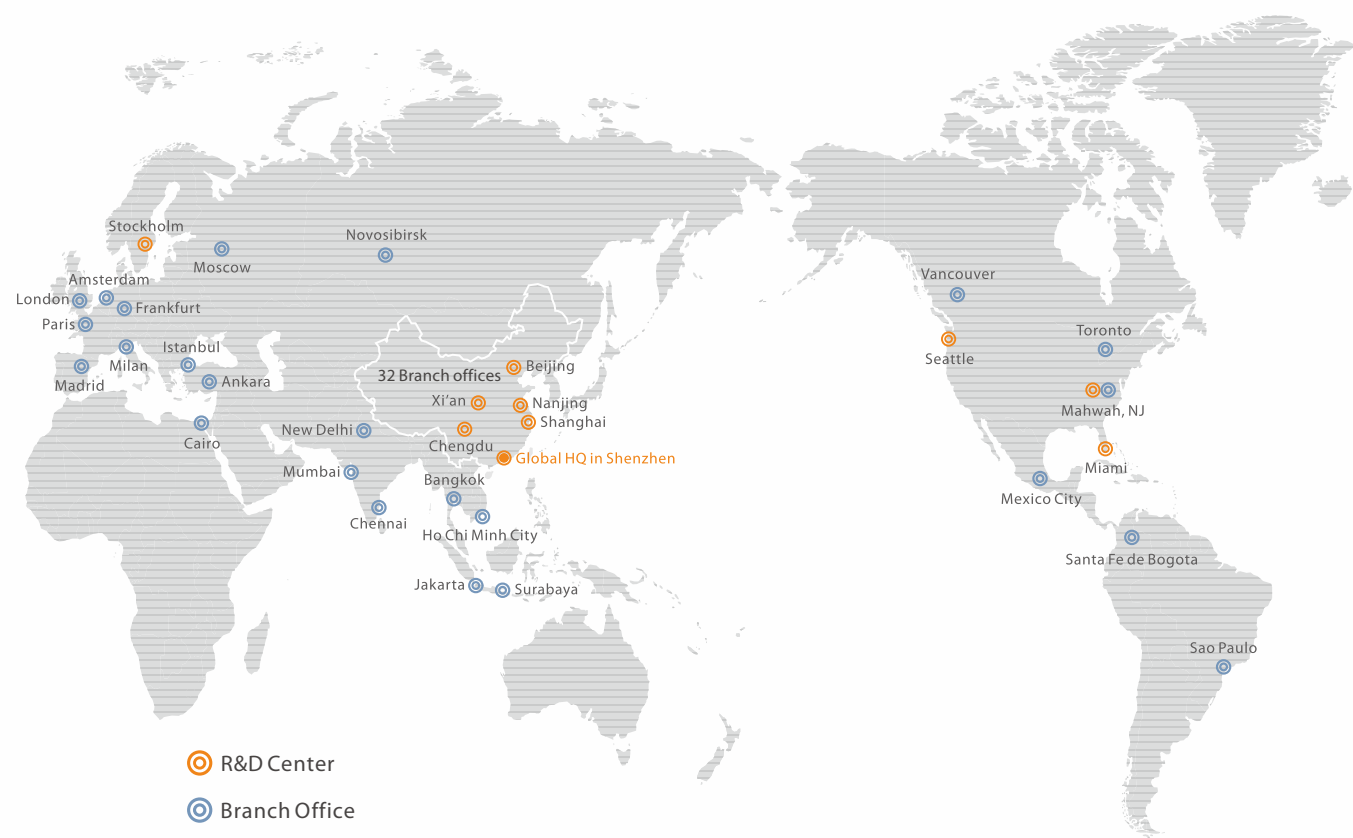

HyBase 3000

Практичность и функциональность, гибкость и универсальность, высокая надежность

Функциональный дисплей панели дистанционного управления



Нормальное положение



Сдвиг по продольной оси в направлении головного конца стола



Поднятие стола



Опускание стола



Положение Тренделенбурга



Обратное положение Тренделенбурга



Поворот влево



Поворот вправо



Поднятие панели для спины



Опускание панели для спины



Положение с перегибом вниз



Положение с перегибом вверх



Положение "0"



Поднятие подголовника



Опускание подголовника

Поднятие и опускание панели для ног, 180° с разделением



Максимальная гибкость



Встроенный подъемник для приподнимания поверхности стола в области почек и грудной клетки



Рассчитанный на тенденцию к усложнению хирургических вмешательств, стол HyBase позволяет безопасно, удобно и эффективно привести пациента в нужное положение при минимуме усилий и временных затрат. Глубоко понимая потребности хирургов и медицинских сестер, Mindray предлагает операционный стол, представляющий собой комплексное решение, отвечающее их запросам и обладающее следующими преимуществами:

- Улучшенный матрас, обеспечивающий комфорт пациента
- Безопасность и эффективность приведения пациента в нужное положение
- Возможность использования технических приемов для обеспечения максимальной универсальности



- Многослойный декомпрессионный бесшовный матрас из водонепроницаемого материала
- Продольный сдвиг столешницы в сторону головной секции 300 мм для максимального доступа С-дуги (Опция)
- Максимальная подъемная способность - 230 кг
- Максимальная безопасная рабочая нагрузка - 185 кг
- Ресурс аккумулятора рассчитан на 50-80 операций
- Механическая система торможения обеспечивает оптимальный уровень устойчивости
- Для возврата в исходное положение достаточно нажать одну кнопку
- Для приведения стола в положение с перегибом вниз или вверх достаточно нажать одну кнопку
- Рентгенопрозрачность деки стола обеспечивает свободный доступ к телу пациента с использованием С-образного штатива
- Три панели управления: панель дистанционного управления, резервная панель управления и педальный переключатель

Комплексное решение Mindray для операционной — Добро пожаловать в демонстрационный зал Mindray!

Все передовые и надежные средства на основе технологии компании Mindray прекрасно сочетаются друг с другом, обеспечивая полную поддержку!



HyBase 3000

Удобный метод укладки пациента, пригодный для всех областей хирургии

Для успеха операции необходимо прежде всего привести пациента в оптимальное положение, обеспечив удобство доступа, оптимальные результаты, экономию времени и эффективность. Необыкновенная универсальность стола HyBase 3000 в сочетании с различными принадлежностями позволяет быстро привести пациента в любое положение и надежно зафиксировать его.

В операционных столах и принадлежностях мы используем высококачественную нержавеющей сталь. Все подушки и пластины рентгенопрозрачные и позволяют хирургам осуществлять контроль с помощью С-образного штатива рентгеновского аппарата. Во избежание травмирования наиболее уязвимых частей тела пациента мы предлагаем гелевые подушки для укладки пациента, изготовленные из материала, имитирующего ткань человеческого тела.



Положение для операций на межпозвоночных дисках
Принадлежность:
0092-30-102639 Подушка для операций на межпозвоночных дисках (из пеноматериала с эффектом памяти, моноблочная)
115-005864-00 Подушки для головы в положении лицом вниз
0092-30-102634 Опора для руки



Положение для операций в области прямой кишки
Принадлежность:
115-007049-00 Устройство для позиционирования прямой кишки
115-005864-00 Подушки для головы в положении лицом вниз
0092-30-102640 Ремень для тела, одинарный
0092-30-102634 Опора для руки



Общее положение для операций на щитовидной железе



Положение для офтальмологических операций
Принадлежность:
115-007045-00 Плита для операции на глазах
115-005872-00 Гелевая подушка для головы
0092-30-102642 Переходник подголовника для нейрохирургии



Положение для операций на кисти или руке
Принадлежность:
115-007047-00 Стол для операций на руках
115-005872-00 Гелевая подушка для головы



Общее операционное положение лежа на спине со сдвигом 300 мм по продольной оси в направлении головного конца стола
Принадлежность:
115-005872-00 Гелевая подушка для головы



Положение для нейрохирургических операций
Принадлежность:
115-012835-00 Регулируемый подголовник подковообразной формы
0092-30-102642 Переходник подголовника для нейрохирургии



Переходник для нейрохирургических операций позволяет подсоединить скобу Мейфилда
Принадлежность:
0092-30-102642 Переходник подголовника для нейрохирургии

Примечание: все положения пациентов, приведенные в данной брошюре, служат лишь в качестве примера и не отражают медицинскую точку зрения.

HyBase 3000

Удобный метод укладки пациента, пригодный для всех областей хирургии

Разработанные в тесном сотрудничестве с конечными пользователями, эти принадлежности удовлетворяют любые потребности позиционирования в хирургии и позволяют привести пациента в оптимальное положение, удобное и для него, и для хирурга.



Положение для литотомии (гинекология и урология)
Принадлежность:
115-007043-00 Держатели ноги с петлей и универсальным радиальным зажимом для малого веса (Пара)
115-013018-00 Дренажный таз для гинекологии и урологии



Положение для литотомии
Принадлежность:
0092-30-102635 Моноблочная опора для ноги большого веса, с универсальным моноблочным радиальным зажимом для большого веса, подушкой и моноблочным фиксирующим ремнем
115-013018-00 Дренажный таз для гинекологии и урологии



Положение на боку для минимально инвазивной хирургии (МИХ)
Быстрая укладка в положение для МИХ с помощью встроенного подъемника, обеспечивающего поднятие поверхности стола на 120 мм



Положение на боку для минимально инвазивной хирургии (МИХ)
Принадлежность:
0092-30-102634 Опора для руки
0092-30-102648 Опора для руки в положении на боку
0092-30-102638 Опора для тела (для пациентов крупного телосложения)
0092-30-102638 Опора для тела (для пациентов некрупного телосложения)
115-005872-00 Гелевая подушка для головы
15-005811-00 Гелевые подушки для рук/ног



Положение для операций в области бедра
Принадлежность:
115-009425-00 Ортопедическое раздвижное устройство с тележкой для перевозки



Положение на боку для операций в области бедра
Принадлежность:
115-007057-00 Раздвижной узел для бедра в положении лежа на боку
115-009425-00 Специально подобранное ортопедическое раздвижное устройство



Положение для операций в области голени
Принадлежность:
115-007055-00 Раздвижной узел для голени
115-009425-00 Ортопедическое раздвижное устройство с тележкой для перевозки



Положение для операций в области голени
Принадлежность:
115-007055-00 Раздвижной узел для голени
115-009425-00 Специально подобранное ортопедическое раздвижное устройство



Положение для операций при травмах шейки бедренной кости
Принадлежность:
115-007055-00 Раздвижной узел для голени
115-009425-00 Ортопедическое раздвижное устройство с тележкой для перевозки

Hybase 3000


Все самые передовые и надежные решения на основе технологий Mindray




Благодаря новым подушкам SFC (на основе специального пеноматериала — Special Foam Core) стол HyBase 3000 обеспечивает превосходное распределение давления, в значительной степени устраняет основную причину пролежней, снижает риск для здоровья в послеоперационный период и ускоряет выздоровление.



Превосходный материал GORE-TEX обладает следующими характеристиками: воздухопроницаемость, непромокаемость, огнеупорность, антистатичность, а также соответствует гигиеническому стандарту.

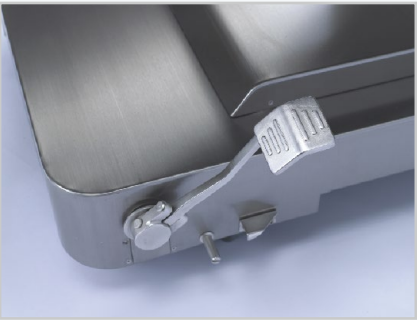

Педальный тормоз обеспечивает максимальную безопасность и удобство эксплуатации.

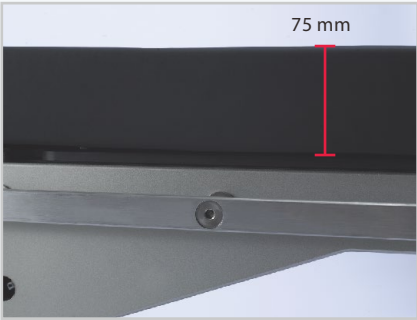

Пациент гарантированно будет чувствовать себя комфортно благодаря дополнительной набивке толщиной 75 мм в двухслойной внутренней конструкции.



Поскольку обычную прикрепленную к поверхности или зашитую подушку невозможно напрямую подвергнуть стирке, смывание пятен крови и других жидкостей, представляющих потенциальную опасность для здоровья хирурга и пациента, является сложной задачей. Благодаря использованию передовой технологии ультр азвуковой сварки швов наша превосходная непромокаемая подушка никогда не доставит вам подобных хлопот.



Ресурс аккумулятора рассчитан на 50-80 операций. Резервные клавиши управления предусмотрены на случай отказа ручного пульта управления. Основание из нержавеющей стали (Опция)


Резервная система управления
Сдвиг по продольной оси*
Поднятие/опускание
Тренделенбург
Обратный Тренделенбург
Поворот влево/вправо
Поднятие и опускание
панели для спины
*Оптимальное функционирование

HyBase 3000


Универсальный операционный стол с электроприводом

Технические характеристики


Размеры	
Общая длина	2060 мм
Высота без набивки	720 мм - 1070 мм
Ширина без боковой штанги	520 мм
Ширина с боковой штангой	590 мм

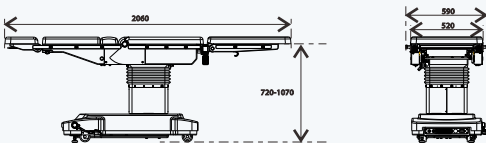


Положение Тренделенбурга	
Тренделенбург	Макс. 30°
Обратный Тренделенбург	Макс. 30°

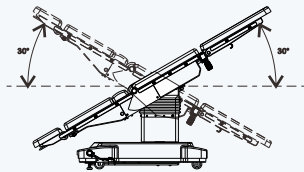


Панели для ног	
Поднятие панелей для ног	Макс. 20°
Опускание панелей для ног	Макс. 90°

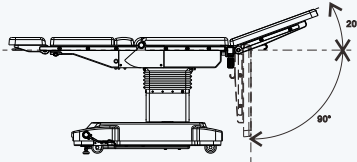


Положение с перегибом вверх	
Положение с перегибом вверх	110°
Тренделенбург	25°
Подъем опорной точки	45°

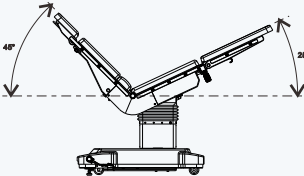


Продольный сдвиг (Опция)	
Продольный сдвиг	Макс. 300 мм

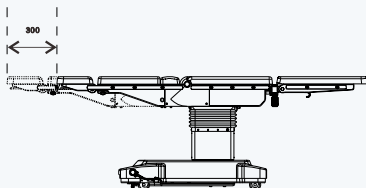


Боковой наклон	
Наклон влево	Макс. 25°
Наклон вправо	Макс. 25°

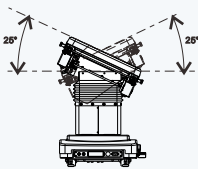


Панель для спины	
Поднятие панели для спины	Макс. 80°
Опускание панели для спины	Макс. 40°

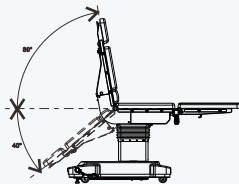

Панель для головы	
Обычный ход панели для головы	Макс. 45°
Расширенный ход панели для головы	Макс. 90°

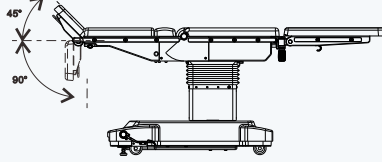

Положение с перегибом вниз	
Положение с перегибом вниз	220°
Обратный Тренделенбург	20°
Опускание опорной точки	20°

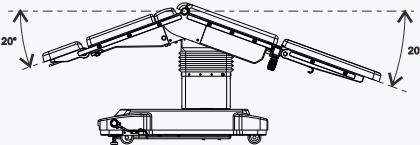

Подъемник для тела (дополнительно)	
Ход подъемника для тела вверх	Макс. 120 мм

