




Концентрируясь на главном

DRÄGER
SAVINA® 300
CLASSIC

Как аппарат ИВЛ может облегчить вашу повседневную работу?

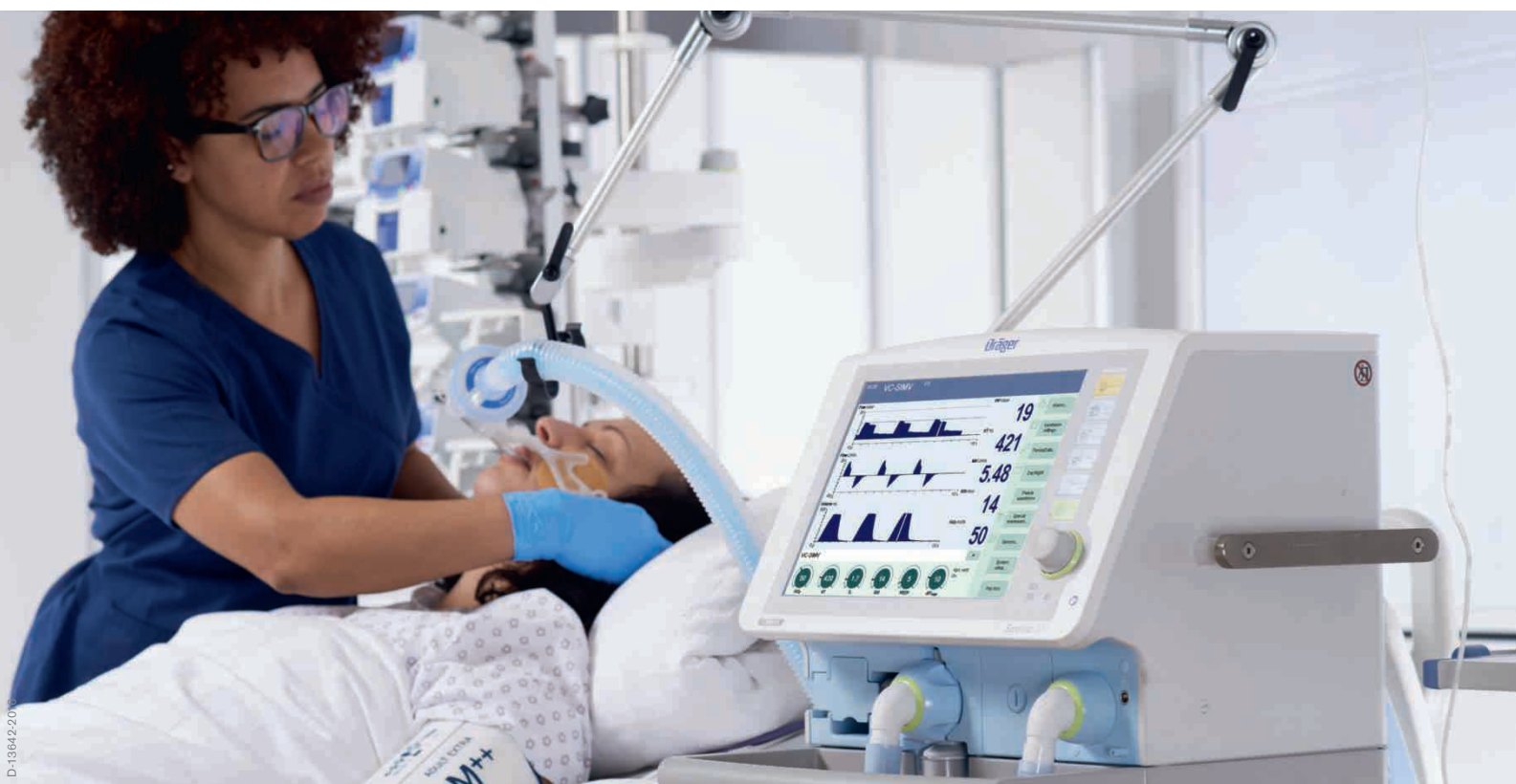

Вы ежедневно стремитесь обеспечить наилучшее качество медицинской помощи. Поэтому вам необходим такой вентилятор, на который можно положиться в любой ситуации. Важно иметь надежное, универсальное и простое в использовании устройство. Это особенно важно в неотложной медицине, где приходится работать в условиях жесткого цейтнота. Интуитивное использование Savina 300 Classic (в этой конфигурации) помогает работать эффективнее и уделять больше времени пациентам.



НАДЕЖНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Во всем мире аппараты ИВЛ Savina обеспечили более 1,4 млрд. часов высококачественной вентиляции легких. В Savina 300 Classic реализована встроенная концепция безопасности, делающая этот аппарат надежным партнером. Он предназначен для вентиляции легких, даже у пациентов в самом критическом состоянии и при этом достаточно гибок для использования практически в любом отделении вашей клиники.

ВЕНТИЛЯЦИЯ – БЕРЕЖНАЯ И ЩАДЯЩАЯ, НО ПРИ ЭТОМ ДЕЙСТВЕННАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ.

Ваша команда быстро научится уверенно пользоваться Savina 300 Classic. Большой цветной сенсорный дисплей и интуитивно понятная операционная система, уделяющая особое внимание основным функциям, значительно упрощают настройку и управление аппаратом.

Эта вентиляционная система, обладающая высоким качеством, характерным для продукции компании Dräger, подает окружающий воздух для использования в качестве дыхательного газа, позволяя устройству работать независимо от центрального газоснабжения.

Необходимая вам функциональность в одном устройстве.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает простоту управления и быструю настройку
- Унифицированный пользовательский интерфейс дает уверенность при использовании и сокращает время обучения
- Быстрая эксплуатационная готовность благодаря автоматической проверке устройства
- Интеллектуальная обработка сигналов тревог для быстрого реагирования на экстренные ситуации
- Гладкие и герметичные поверхности облегчают очистку и дезинфекцию

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

- Широкий диапазон режимов вентиляции
- Спонтанное дыхание с великолепным временем реакции триггера благодаря использованию турбины
- Свободное дыхание возможно благодаря опции AutoFlow® в режиме вентиляции с постоянным объемом при минимальном уровне давления
- Неинвазивная вентиляция (NIV) с очень быстрым временем отклика на усилия пациента - доступна во всех режимах
- Расширенные графические возможности с петлями, трендами и регистрацией данных
- При необходимости изменения режимов вентиляционной терапии не требуется замена устройства: Кислородная терапия позволяет подавать постоянный поток O₂

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ СИСТЕМ ГАЗО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- Встроенная турбина с малым временем отклика и стабильно высокой интенсивностью потока до 250 л/мин
- До пяти часов независимой вентиляции благодаря встроенным и внешним батареям
- Возможность быстрого подсоединения к транспортному модулю снабжения для удобства работы с газовыми баллонами
- Прикроватная консоль для быстрого крепления вентилятора к кровати пациента
- Вход кислорода от источника низкого давления (LPO) для вентиляции без централизованного газоснабжения



Уверенная работа на всех этапах.



Надежный спутник на всех этапах ИВЛ: Savina 300 Classic подходит как для инвазивной, так и для неинвазивной вентиляции пациентов с острыми и хроническими заболеваниями. Различные режимы вентиляции и кислородная терапия в стационарном состоянии и в движении.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

- NIV во всех режимах вентиляции служит для предотвращения или отсрочки интубации, снижения рисков, связанных с интубацией^{1, 2}
- Точный и чувствительный триггер уменьшает усилия, затрачиваемые на дыхание

СТАБИЛИЗАЦИЯ

- AutoFlow® автоматически адаптирует уровень давления к изменяющейся работе легких пациента и обеспечивает гарантированный дыхательный объем. Протективная вентиляция легких с помощью PC-AC позволяет избежать применения высоких давлений
- Встроенная функция капнографии обеспечивает непрерывный мониторинг продукции CO₂

ОТЛУЧЕНИЕ

- PC-BIPAP/PC-SIMV+³ поддерживает постепенное отлучение, обеспечивая более плавный переход от механической вентиляции к самостоятельному дыханию
- Открытая дыхательная система с опцией AutoFlow® позволяет пациенту самостоятельно дышать во всех режимах вентиляции
- Чувствительный триггер и быстрая реакция на необходимый пациенту максимальный поток помогают при использовании вентиляции с управлением по давлению

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

- NIV может снизить риск повторной интубации и инфицирования, а также сократить сроки пребывания в отделениях интенсивной терапии. Чувствительный триггер помогает улучшить синхронизацию вентилятора с пациентом
- Спонтанное дыхание благодаря CPAP/PS
- Кислородная терапия обеспечивает восстановление после экстубации и неинвазивной вентиляции

¹ Ram FSF et al, The Cochrane Library 2005, Issue 4

² Lightowler J, Wedzicha JA et al., BMJ 2003; 326; 18

³ BIPAP - товарный знак, используемый по лицензии

⁴ Ferrer M; Am J Respir Crit Med Vol 168. pp 1438-1444, 2003

Принадлежности

MT-0575-2007



ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА ДЛЯ NIV CLASSICSTAR

Dräger предлагает широкий ассортимент специализированных принадлежностей для Savina 300 Classic. ClassicStar NIV – это полнолицевая маска для неинвазивной вентиляции. Надуваемая манжета обеспечивает оптимальное прилегание маски к лицу пациента, повышая тем самым эффективность терапии.

Транспортировка

D-43492-2012



ТРАНСПОРТНЫЙ МОДУЛЬ, ПРИКРОВАТНАЯ КОНСОЛЬ, КОМПЛЕКТ БАТАРЕИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Достаточно гибкий для использования в любом месте вашей клиники, обеспечивающий до пяти часов автономной вентиляции благодаря встроенной батарее и внешнему источнику питания, транспортный модуль снабжения для двух газовых баллонов и прикроватная консоль для быстрого подключения аппарата ИВЛ к кровати пациента при транспортировке.

Обучение

D-12044-2016



УЧЕБНОЕ ВИДЕО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА SAVINA 300

Этот фильм демонстрирует, насколько легко управлять вентиляторами Savina 300. В нем, на примере Savina 300 Select, представлены наиболее важные функции. Здесь показано, как запустить устройство, как им управлять, очищать его и обслуживать.

Обслуживание

D-32436-2011



DRÄGERSERVICE – КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Мы предлагаем контракты на сервисное обслуживание, удовлетворяющие любые ваши потребности: от проверки и профилактического обслуживания до комплексных сервисных программ. У нас есть решение для ваших индивидуальных потребностей. В любой комплектации Savina 300 Classic поставляется с 8-летней гарантией изготовителя на турбину*.

* Ограниченная гарантия производителя в соответствии с условиями, указанными в Инструкции по эксплуатации. Относится только к устройствам, приобретенным после 1 января 2015 года.

Для получения дополнительной информации и скачивания материалов посетите сайт www.draeger.com

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.

Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

ШТАБ-КВАРТИРА

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

РОССИЯ

ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Электrozаводская ул., д.33, стр.4
Москва, Россия, 107076
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

